

Aplicación Preventicus Heartbeats

Instrucciones de uso



Índice de contenidos

1	Símbolos	5
2	Descripción del producto y uso previsto	6
2.1	Uso previsto	6
2.2	Usuarios previstos	6
2.3	Indicaciones, contraindicaciones y exclusiones	7
2.4	Uso previsto	7
2.5	Utilidad clínica	7
2.6	Principio de medición: Conceptos básicos del análisis de la curva de la frecuencia cardíaca	7
3	Indicaciones	8
3.1	Advertencias	8
3.2	Información adicional y explicaciones sobre la eficacia y los riesgos residuales	8
4	Vida útil del producto	9
5	Copia de seguridad de los datos	9
6	Primer uso	9
6.1	Iniciar la app Preventicus Heartbeats	10
6.2	Lea y acepte la declaración de propósitos, incluidas las advertencias, las condiciones de uso y la política de privacidad	11
6.3	Introduzca el código de acceso	11
6.4	Registrarse y crear una cuenta de usuario	12
7	Pantalla de inicio	12
8	Tomar una medición	13
8.1	Selección de la variante de medición	13
8.2	Preparación del dispositivo	14
8.3	Posición correcta para la medición	15
8.4	Posición de medición alternativa	16
8.5	Uso de asistencias para el posicionamiento	16
8.6	Reconocer la buena calidad de señal	17
8.7	Comportamiento durante la medición	17
8.8	Inicio de la medición	17
9	Creación de un informe de medición	18

10	Interpretación de los resultados	19
10.1	Mala calidad de la señal	20
11	Informes y Telecare	21
11.1	Descripción general del informe de medición	21
11.2	Lista de Lista del informe de medición	24
11.3	Telecare - Informes	25
11.4	Telecare – Solicitar un informe	26
11.5	Telecare: ver estado e informe	28
11.6	Inicio - Última medición	28
12	Menú	29
12.1	Datos básicos	29
12.2	Función de recordatorios	30
12.3	Inicio de sesión	30
12.3.1	Cuenta de usuario	31
12.3.2	Cambio de dispositivo	31
12.3.3	Múltiples usuarios - cambio de usuario	32
12.4	Acerca de Heartbeats	33
12.5	Lo que hay que saber	33
13	Versión completa	34
13.1	Compra In-app	34
14	Eliminar cuenta de usuario	35
15	Salud	36
16	Buzón	36
17	Mensajes de error	37
18	Desinstalación de la aplicación	38
19	Datos técnicos	38
20	Información del fabricante	38

En estas instrucciones se detallan el uso y las funciones de la aplicación Preventicus Heartbeats en teléfonos inteligentes con sistemas operativos iOS o Android. Para una mayor claridad, en el resto del documento únicamente hacemos referencia a los teléfonos inteligentes.



Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar la aplicación Preventicus Heartbeats.

Encontrará siempre la versión actualizada de las instrucciones en <https://www.preventicus.com/manuals-preventicus-heartbeats-app/>

Encontrará más información en la página web de ayuda de Preventicus (<https://www.preventicus.org/heartbeats/support-faqs/>). También puede solicitar

1 Símbolos

En estas instrucciones de uso pueden aparecer los siguientes símbolos (los colores y el tamaño pueden variar):

Símbolo	Significado
	Este software independiente es un producto sanitario clasificado como categoría de riesgo IIa, de acuerdo con la norma 11 del Reglamento (UE) 2017/745.
	Advertencia Las advertencias siempre son significativas desde el punto de vista de la seguridad.
	Indicación Una indicación señala información valiosa.
	Declaraciones del fabricante
	Siga las instrucciones electrónicas de uso.
	producto sanitario

2 Descripción del producto y uso previsto

La aplicación Preventicus Heartbeats es un software que registra la curva de la frecuencia cardíaca, utiliza los datos para analizar el ritmo cardíaco y presenta los resultados.

Las curvas de frecuencia cardíaca se registran en la aplicación tocando la cámara del teléfono con la yema del dedo. A continuación, se analiza el ritmo cardíaco utilizando la curva de la frecuencia cardíaca registrada. Los resultados del análisis del ritmo cardíaco se presentan en la aplicación Preventicus Heartbeats. Si se detectan signos de una arritmia cardíaca, si no está bajo control médico y si se produce reiteradamente, se recomienda una nueva valoración médica por parte de un profesional.

Si se siente mal o presenta algún otro síntoma preocupante, busque atención médica inmediatamente.

La aplicación Preventicus Heartbeats puede asignarle a una de las tres categorías en función de la evaluación: sin anomalías, sospecha de extrasístoles (>5 % de los latidos son irregulares) y arritmia absoluta con sospecha de fibrilación auricular. Además, se facilita información sobre la sospecha de bradicardia y taquicardia relevantes sin diferenciar más su causa.

El ritmo cardíaco se analiza mediante curvas de la frecuencia cardíaca de un minuto y de cinco minutos. Los resultados del análisis del ritmo cardíaco se pueden presentar para los intervalos de uno o de cinco minutos. Se detectan y eliminan las posibles alteraciones y artefactos de los datos. Para mejorar la calidad de la señal de los datos de medición, se puede utilizar un procedimiento algorítmico, que incluya métodos de inteligencia artificial, con el fin de identificar y procesar, a partir de la señal de vídeo grabada, aquellas partes de la señal que presenten una calidad suficiente para su posterior análisis.

Se ha demostrado que Preventicus detecta la fibrilación auricular y las extrasístoles, y determina con precisión la frecuencia cardíaca en sus estudios clínicos propios (consulte también: <https://www.preventicus.org/evidence/>). Se ha demostrado que el algoritmo subyacente de este producto puede diferenciar entre la fibrilación auricular y el ritmo cardíaco normal con una precisión superior al 96 %.

2.1 Uso previsto

La aplicación Preventicus Heartbeats se utiliza para detectar arritmias cardíacas en forma de diagnóstico pendiente de confirmar y para determinar y caracterizar la frecuencia cardíaca. Se pueden detectar las siguientes arritmias cardíacas: arritmia absoluta con sospecha de fibrilación auricular, extrasístoles y latidos irregulares, frecuencia cardíaca con signos de bradicardia y taquicardia.

El resultado obtenido es solo un posible indicio («diagnóstico pendiente de confirmar»), no un diagnóstico en el sentido médico. Los resultados obtenidos tienen un carácter meramente informativo y en ningún caso sustituyen el diagnóstico, el asesoramiento, la atención o el tratamiento personal de un profesional de la medicina o con formación médica.

2.2 Usuarios previstos

La aplicación Preventicus Heartbeats es adecuada para que las siguientes personas la utilicen por sí mismas:

- Personas con confianza en el uso de teléfonos inteligentes y wearables
- Personas que puedan leer y comprender textos escritos en letras latinas y números arábigos
- Personas con un nivel lingüístico competente en los idiomas disponibles para la aplicación (véase el capítulo 18)

2.3 Indicaciones, contraindicaciones y exclusiones

La aplicación Preventicus Heartbeats está destinada a las siguientes indicaciones:

- Personas con sospecha de arritmias cardíacas como la fibrilación auricular
- Personas, independientemente de su sexo
- Personas mayores de 18 años
- Personas sin deficiencias visuales o con deficiencias visuales ligeramente corregidas
- Tejido cutáneo sano con el que entra en contacto la cámara

Sin embargo, la aplicación Preventicus Heartbeats no está pensada para ser utilizada por personas

- Con marcapasos, un DAI u otros dispositivos electrónicos implantados, ya que pueden controlar el ritmo cardíaco natural.
- Con deficiencias cognitivas

2.4 Uso previsto

Las mediciones con la app Preventicus Heartbeats deben llevarse a cabo a temperatura ambiente normal y en condiciones de luz normales. La cámara únicamente debe utilizarse en tejido cutáneo sano. Durante la medición, el dedo no debe tocar el flash. No recomendamos el uso de este producto si presenta menor sensibilidad al dolor. La aplicación no debe utilizarse cuando el dispositivo se está cargando.

La aplicación Preventicus Heartbeats está diseñada para utilizarla en un dispositivo probado y aprobado por Preventicus GmbH para tal fin. En los siguientes enlaces encontrará una lista actualizada:

<https://heartbeats.preventicus.com/devices/es>

2.5 Utilidad clínica

Las arritmias cardíacas, especialmente la fibrilación auricular no detectada, se asocian a un riesgo significativamente mayor de sufrir un accidente cerebrovascular. La fibrilación auricular suele ser imperceptible, en muchas ocasiones únicamente se produce de forma esporádica y, por tanto, suele ser difícil de diagnosticar.

Por ello, las asociaciones de cardiología recomiendan la medición independiente y periódica del ritmo cardíaco con aplicaciones, dispositivos portátiles o teléfonos inteligentes adecuados. Si se detecta la fibrilación auricular y el médico la confirma posteriormente con un ECG, el riesgo de accidente cerebrovascular puede reducirse o normalizarse con medicación. La aplicación Preventicus Heartbeats ofrece una solución para la medición independiente y periódica del ritmo cardíaco con el fin de detectar los primeros signos de fibrilación auricular, a fin de que las personas afectadas logren con mayor rapidez su diagnóstico y posterior tratamiento indicado por un cardiólogo y, por tanto, para reducir el riesgo de accidente cerebrovascular.

2.6 Principio de medición: Conceptos básicos del análisis de la curva de la frecuencia cardíaca

Con Preventicus Heartbeats, puede registrar su curva de la frecuencia cardíaca utilizando la yema del dedo y la cámara de su teléfono: coloque el dedo sobre el objetivo de la cámara e ilumine la yema del dedo con la luz del flash. La curva de la frecuencia cardíaca puede extraerse de la señal de la cámara utilizando métodos de análisis de señales. Es similar al procedimiento médico de la fotopletiografía. La curva de la frecuencia cardíaca corresponde a la pulsación de la sangre causada por la actividad cardíaca.

Los posibles signos de arritmia cardíaca pueden detectarse utilizando la variabilidad de los latidos del corazón junto con métodos de análisis de bioseñales.

3 Indicaciones

3.1 Advertencias



El uso seguro de Preventicus Heartbeats se garantiza únicamente si se siguen las siguientes advertencias.

1. En caso de que la tenga, retire la funda protectora de su teléfono inteligente.
2. No efectúe la medición con el cargador conectado.
3. En caso de que la luz del flash de su teléfono se caliente visiblemente a pesar del uso correcto (dedo colocado solo sobre la lente de la cámara, no sobre la luz), interrumpa la medición.
4. Si tiene hiposensibilidad al dolor, recomendamos no usar este producto.
5. Los medicamentos o fármacos que afectan a la frecuencia cardíaca, los marcapasos o los desfibriladores podrían alterar los resultados del análisis del ritmo.

(i) Nota: Le rogamos que nos comunique cualquier incidente grave que se produzca en relación con la aplicación Preventicus Heartbeats a nosotros y a la autoridad competente del país en el que resida. (Encontrará la información de contacto detallada en la sección «Información del fabricante».)

Correo electrónico: support@preventicus.com

3.2 Información adicional y explicaciones sobre la eficacia y los riesgos residuales

El ECG es el método de referencia para el diagnóstico relativo al ritmo cardíaco. El análisis del ritmo cardíaco a partir de la onda de pulsaciones es un método de cribado adecuado para una etapa previa a otros procedimientos de diagnóstico. El paciente utiliza la aplicación Preventicus Heartbeats en un entorno no clínico y no está diseñada para utilizarla en la toma de decisiones en situaciones potencialmente mortales ni para la monitorización en tiempo real de las constantes vitales, ni interfiere con las vías de diagnóstico o las medidas terapéuticas existentes y basadas en directrices.

Hay que hacer una distinción básica entre la detección de la fibrilación auricular (FA) (cribado o seguimiento) y su posterior diagnóstico. La FA debe ser diagnosticada exclusivamente de conformidad con las directrices con un ECG de pared torácica, generalmente efectuado por cardiólogos. Las aplicaciones de Preventicus no están diseñadas para un diagnóstico final de FA con implicaciones terapéuticas, sino que están diseñadas únicamente para el cribado de la FA o su monitorización sin implicaciones terapéuticas. Una implicación terapéutica únicamente puede derivarse de un ECG real.

Preventicus Heartbeats detecta la fibrilación auricular con una precisión general del 96 %, según los estudios realizados. La sensibilidad (tasa de positivos verdaderos) es de aproximadamente el 92 %. La sensibilidad hace referencia a la probabilidad de que la fibrilación auricular sea reconocida como tal. Paralelamente, la especificidad (tasa de negativos verdaderos) da el porcentaje de usuarios que no tienen fibrilación auricular para los que el resultado (semáforo verde) es correcto. La especificidad de Preventicus Heartbeats es del 99 %.

La fibrilación auricular puede producirse de forma esporádica. Si no está presente en el momento de la medición, Preventicus Heartbeats no podrá detectarla.

No se puede descartar que una calidad deficiente de la señal, enfermedades preexistentes (como la diabetes, las enfermedades vasculares o la cirugía cardiovascular previa), los medicamentos que afectan a la frecuencia cardíaca o los marcapasos puedan distorsionar la precisión de Preventicus Heartbeats.

4 Vida útil del producto

La vida útil se define por el periodo que transcurre antes de que se publique una nueva versión de la aplicación. Dicha actualización se indica con un aumento de, como mínimo, el segundo dígito del número de versión. El número de versión se especifica en las respectivas tiendas de aplicaciones.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.preventicus.heartbeats&hl=en_US

<https://apps.apple.com/de/app/preventicus-heartbeats/id1122978949?l=en>

La información sobre las actualizaciones se ofrece a través del sistema operativo. En función de la configuración del usuario en su teléfono inteligente, la actualización se instala automáticamente o debe autorizarla e instalarla.

5 Copia de seguridad de los datos

Se puede hacer una copia de seguridad de los datos de la siguiente manera:

Los informes se pueden exportar y enviar en PDF, por ejemplo, por correo electrónico. Los informes pueden guardarse en otras bases de datos (por ejemplo, PDMS, programa Praxis) o en otros medios de almacenamiento (por ejemplo, disco duro, tarjeta de memoria).

Preventicus GmbH recomienda proteger el teléfono en el que se ejecuta la aplicación con un código (PIN, número de identificación personal), reconocimiento facial o reconocimiento de huellas dactilares. Es importante que su teléfono inteligente esté protegido porque contiene información sanitaria personal.

6 Primer uso

La aplicación Preventicus Heartbeats puede ejecutarse en teléfonos inteligentes con los siguientes sistemas operativos: iOS 15 o superior o Android 8.0 o superior.

Puede consultar la lista actualizada de los dispositivos probados y aprobados en <https://heartbeats.preventicus.com/devices/es>.

En el caso de los teléfonos inteligentes para los que no se ha demostrado la idoneidad de la aplicación Preventicus Heartbeats, esta no aparecerá en la tienda correspondiente.

Puede descargar e instalar la aplicación Preventicus Heartbeats desde los siguientes enlaces:

Enlace a la App Store para dispositivos iOS:

<https://apps.apple.com/de/app/preventicus-heartbeats/id1122978949?l=en>

Enlace a la Play Store para dispositivos Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.preventicus.heartbeats&hl=en_US

Después de instalar la aplicación Preventicus Heartbeats y cuando la utilices por primera vez, primero debes leer y aceptar la declaración de finalidad, incluidas las advertencias, las condiciones de uso y la política de privacidad, para poder continuar. Si dispone de un código de acceso, tendrá la opción de introducirlo. También puede omitir este paso. En ambos casos, accederá a la pantalla de registro para crear una cuenta en la aplicación.

Términos y condiciones generales <https://www.preventicus.org/terms-and-conditions/>

Política de privacidad para la aplicación Preventicus Heartbeats
<https://www.preventicus.org/heartbeats/privacy-policy-of-using-the-app/>

6.1 Iniciar la app Preventicus Heartbeats

Tras instalar la aplicación, el corazón de Preventicus Heartbeats aparecerá en la pantalla de tu smartphone. Al hacer clic en el corazón, se abrirá la aplicación.

Cuando la aplicación esté abierta, la primera pantalla que verá será la pantalla de inicio. La pantalla muestra iconos relevantes para el producto, incluido un icono para las instrucciones de uso. Al hacer clic en el icono se abren las instrucciones de uso en una ventana adicional del navegador de su smartphone.

La pantalla de inicio consta de un total de cinco páginas con información sobre funciones importantes de la aplicación y, además, sobre el programa de asistencia preventiva en colaboración con las compañías de seguros médicos. Puede ver las páginas individuales deslizando el dedo por la pantalla de derecha a izquierda o de izquierda a derecha.

Si es la primera vez que utiliza la aplicación Preventicus Heartbeats, haga clic en el botón "Nuevo aquí" para continuar.


Si ya es un usuario activo de la aplicación, vaya al capítulo 12.3 Inicio de sesión.



6.2 Lea y acepte la declaración de propósitos, incluidas las advertencias, las condiciones de uso y la política de privacidad.

Antes de empezar a utilizar Preventicus Heartbeats, es importante saber cómo funciona y a qué debe prestar atención. Por lo tanto, en el siguiente paso, lea atentamente las condiciones de uso publicadas, las declaraciones de finalidad y advertencia y la información sobre privacidad. Para continuar, primero debe aceptar estas condiciones. Para ello, haga clic en las casillas rectangulares para colocar una marca de verificación que indique que las acepta. A continuación, pulse el botón "Continuar" para seguir adelante.


Las dos primeras casillas sobre Condiciones de uso, Finalidad, incluidas las advertencias, y la Información sobre privacidad son campos obligatorios y deben aceptarse para continuar (1). La tercera casilla es opcional y, por tanto, no es necesario aceptarla para continuar (2).

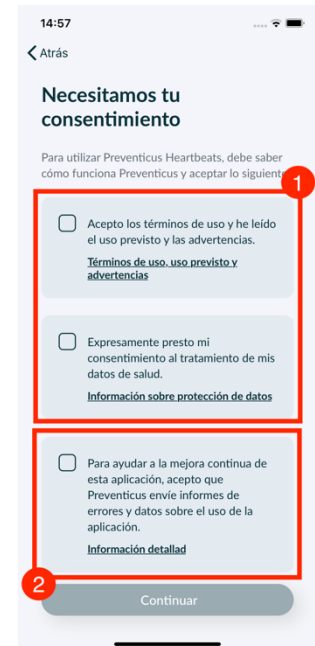

6.3 Introduzca el código de acceso

En el siguiente paso, tendrá la posibilidad de introducir un código de acceso (1) para desbloquear funciones avanzadas de la aplicación Preventicus Heartbeats. Puede obtener un código de acceso, por ejemplo, a través de un programa de prevención de su seguro médico. Una vez introducido el código de acceso, haga clic en el botón «Continuar con el código de acceso» para seguir adelante.

Además, tiene la posibilidad de comprobar, mediante un generador de códigos, si también puede obtener un código de acceso de este tipo. Para ello, seleccione «Continuar sin código de acceso» (2). En la página siguiente, podrá iniciar la comprobación (3) u omitir este paso (4).

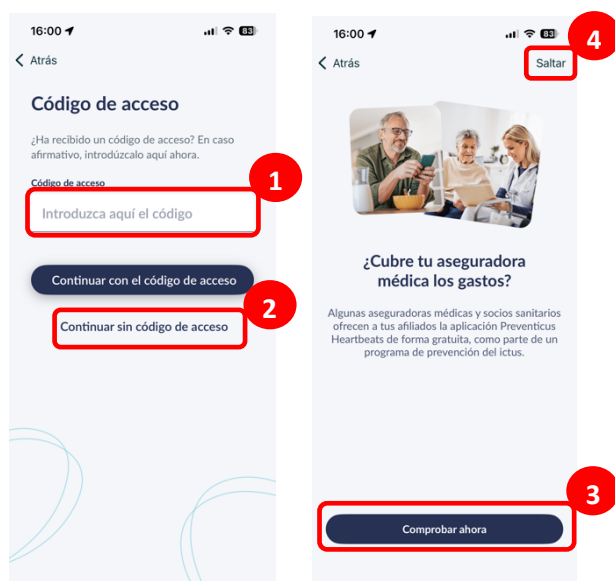

6.4 Registrarse y crear una cuenta de usuario

Preventicus Heartbeats app como usuario, tus datos de usuario quedarán vinculados a tu cuenta en el futuro. Cuando cambie de smartphone, sólo tendrá que iniciar sesión en la aplicación y su licencia y sus datos se restaurarán automáticamente.

Para registrarse, introduzca su dirección de correo electrónico y una contraseña de su elección. El registro sólo puede completarse si toda la información está correctamente escrita.

A continuación, haga clic en "Regístrese ahora" para vincular su cuenta de usuario con sus datos.

Para completar la creación de su cuenta de usuario y poder acceder a sus datos y resultados en cualquier momento, deberá confirmar su registro al final. Para ello, recibirá un correo electrónico nuestro con un enlace de activación. Al hacer clic en el enlace, confirma su registro.

i Nota: Dispone de 1 mes para confirmar su dirección de correo electrónico. Si expira este plazo, tiene la opción de solicitar de nuevo la confirmación y se le enviará un nuevo correo electrónico.

i Nota: Si no recibe un enlace de activación de confirmación, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente: support@preventicus.com.

13:54

< Atrás

Inscripción

Introduzca su dirección de e-mail y elija una contraseña para crear su cuenta.

E-Mail

Introducir e-mail

Repetir email

Vuelva a introducir el correo electrónico

Contraseña

Elegir contraseña

- mínimo 8 caracteres
- 1 minúscula
- 1 mayúscula
- 1 número

Repetir contraseña

Vuelva a introducir la contraseña

Registrar

7 Pantalla de inicio

En la pantalla de inicio encontrará las funciones principales de la aplicación Preventicus Heartbeats:

- **Variantes de medición** (véase el Capítulo 8.1 Selección de la variante medición)(1)
- **Informes** (véase el Capítulo 11 Informes y Telecare) (2)
- **Recordatorios** (véase el Capítulo 12.2 Función de recordatorios) (3)
- **Buzón** (véase el capítulo 16 Buzón) (4)
- **Inicio de sesión** (véase el Capítulo 12.3.1 Cuenta de usuario) (5)
- **Área de ayuda/FAQ** (véase el capítulo 8 Realizar una medición) (6)
- **Cosas que debe saber** (consulte el capítulo 12.5 Cosas que debe saber) (7)
- **Salud** (véase el capítulo 15 Salud) (8)

En el menú (9), además de las funciones principales, encontrará información sobre el perfil del usuario, sobre las configuraciones y sobre el tema «versión completa».

Encontrará más detalles en el Capítulo 12 Menú.



8 Tomar una medición

Nota: Se requiere una conexión estable a Internet para la medición y el posterior análisis del ritmo cardíaco con visualización de los resultados. Asegúrese de que la conexión a Internet es estable antes de iniciar la medición.

8.1 Selección de la variante de medición


Una vez introducidos los datos, accederá a la interfaz general de usuario. Para iniciar una medición, pulse el botón central "Medir" de la barra de navegación.

En la versión completa, puede elegir entre dos opciones de medición:

- 1min:** Prueba de un minuto que incluye un análisis completo y un informe de medición. La norma para una medición regular.
- 5min:** Prueba detallada de cinco minutos que incluye un informe de medición y la máxima exactitud. Se recomienda cuando se detecten anomalías en la evaluación estándar, por recomendación médica y, especialmente, en caso de que, como usuario privado, usted desee efectuar una valoración a través de Telecare-Service.

Puede elegir entre las dos variantes en la pantalla de medición y, a continuación, iniciar la medición.

La versión gratuita ofrece la valoración del ritmo mediante una medición de 1 minuto como no anómala (el semáforo se pone en gris) o anómala (el semáforo se pone en anaranjado). El resultado se indica mediante un sistema de semáforos. Solo se crea un informe de medición en la versión completa.

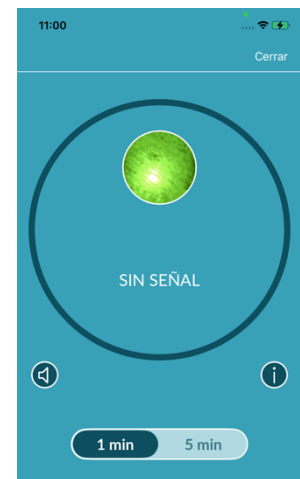

LA MEDICIÓN COMIENZA
tan pronto como pone
su dedo en la cámara

8.2 Preparación del dispositivo

Antes de la primera medición, se presentan consejos sobre cómo efectuar una medición (tutorial). Léalas atentamente. Una vez concluido el tutorial, puede volver a verlo o iniciar la medición.

Antes de iniciar la medición, por favor retire el cargador y la funda de protección del teléfono, si los tiene.



8.3 Posición correcta para la medición

Para adoptar la posición correcta de medición, apoye el antebrazo sobre la mesa, de manera que pueda sentirse relajado. A continuación, tome el teléfono celular y coloque la lente de la cámara en el extremo superior del dedo meñique. Tome la precaución de no cubrir la luz LED del flash. Para llevar a cabo la medición correctamente, toda la lente de la cámara debe estar sobre el dedo.



8.4 Posición de medición alternativa

Alternativamente, puede mantener el teléfono inteligente en su mano. Asegúrese de sujetar el teléfono inteligente de forma estable. Coloque la parte delantera del dedo índice en la lente de la cámara. Asegúrese de que el LED del flash no quede cubierto.



8.5 Uso de asistencias para el posicionamiento

La colocación correcta del objetivo de la cámara desempeña un papel decisivo para una medición correcta. Por lo tanto, utilice la ventana de vista previa proporcionada como ayuda para el posicionamiento. Con esta ventana de vista previa, también puede identificar la cámara correcta en un smartphone que tenga varias cámaras. El objetivo de la cámara está correctamente colocado cuando el círculo interior de la ventana de vista previa aparece completamente rojo.



8.6 Reconocer la buena calidad de señal

En el siguiente paso, el sistema comprueba la calidad de la señal. Coloque la cámara en la punta de su dedo y espere hasta que el sistema haya calibrado la calidad de la señal. A continuación, la medición se inicia automáticamente.




8.7 Comportamiento durante la medición

Siéntese relajado durante la medición. Evite los movimientos y no hable durante la grabación.

8.8 Inicio de la medición

Después de oprimir «Iniciar la medición ahora», el dispositivo está listo para la medición. Coloque el dispositivo como se describió en el tutorial. Coloque la lente de la cámara en la punta del dedo, tal como se describe en el manual. Tan pronto como la potencia de la señal sea suficiente, la medición comenzará automáticamente.

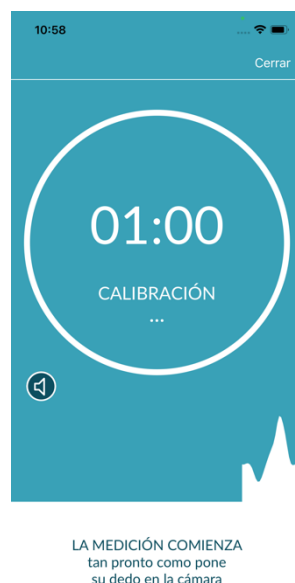

9 Creación de un informe de medición

Una vez se haya completado la medición, tiene la opción de introducir un título y modificar el año de nacimiento y el género, en caso necesario. También puede introducir cómo se siente (selección de una lista), y los comentarios que pudiera tener respecto de la medición («Hoy me siento muy bien», «Hoy no me siento muy bien»). Esta información se transfiere luego a un informe de medición. A continuación, puede guardar el informe de medición.

CREAR INFORME EN PDF

opcional

Título

1955

Año de nacimiento

optativo

¿Cómo está?

optativo

Comentario

guardar

10 Interpretación de los resultados

Una vez guardada la medición, el resultado se mostrará en la página de detalles correspondiente. Esta página se divide en varias secciones.

En la primera sección (1) encontrará un resumen escrito con posibles recomendaciones de actuación.

Debajo hay dos mosaicos.

El mosaico de la izquierda (2) muestra el resultado de su ritmo cardíaco.

Los colores posibles son:

Color del semáforo	Significado
Verde	Ritmo cardíaco regular
Amarillo	Alteración leve del ritmo cardíaco (más del 5 % de todos los pulsos son irregulares)
Rojo	Arritmia absoluta con sospecha de fibrilación auricular En caso de que no esté bajo control médico y ante la manifestación repetida, es necesario consultar con un cardiólogo.

Tab. 10.1 Indicaciones de color y valoración del ritmo cardíaco



El mosaico de la derecha (3) muestra el resultado de tu pulso. Los colores posibles son:

Color del semáforo	Significado
Verde	Frecuencia cardíaca normal
Amarillo	Frecuencia cardíaca levemente elevada o disminuida
Rojo	Frecuencia cardíaca significativamente elevada o disminuida (taquicardia/bradicardia).

Tab. 10.2 Indicaciones de color y valoración de la frecuencia cardíaca

Ambos mosaicos (2) y (3) ofrecen más información detallada al pulsarlos:




10.1 Mala calidad de la señal

En caso de mala calidad de la señal, por ejemplo, por moverse, hablar, toser o mal posicionamiento de la cámara en la yema del dedo durante la medición, no podrá efectuarse la valoración. En la sección «Ver tutorial de medición», puede volver a ver el tutorial y, a continuación, repetir la medición.

La evaluación fiable del ritmo cardíaco con la aplicación depende de la buena calidad de la señal. Tenga en cuenta lo siguiente al hacer una medición:

1. Siéntese erguido y relajado.
Variante de medición 1: Coloque el objetivo de la cámara en la parte más adelantada de su dedo para que quede estable. **Variante de medición 2:** Sostenga el teléfono inteligente con firmeza y tranquilidad en la mano. Coloque la punta del dedo índice en el objetivo de la cámara.
2. No toque la luz del flash con el dedo
3. El círculo (vista previa) debe ser de color rojo y estar completamente tapado por el dedo.
4. A continuación, el sistema calibra la calidad de la señal y, transcurridos 3 segundos, la medición se inicia automáticamente.
5. Si es necesario, masajee la yema del dedo que utiliza para la medición para aumentar la circulación sanguínea.

Si tiene alguna dificultad, contacte con el servicio de ayuda de Preventicus en: support@preventicus.com

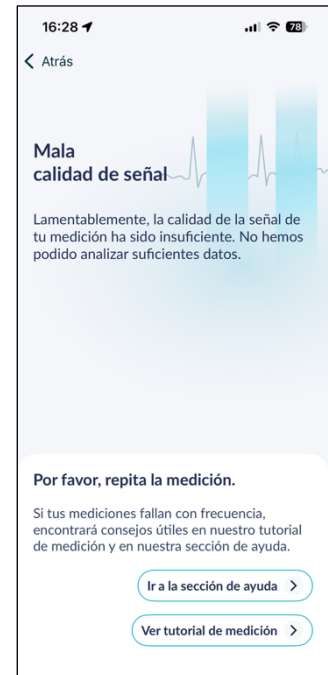

11 Informes y Telecare

11.1 Descripción general del informe de medición

Tanto para las primeras mediciones gratuitas como para las suscripciones activas, tras completar con éxito la medición (1 min o 5 min), recibirá el resultado en forma de un informe resumido de los resultados de la medición en formato PDF. Puede acceder a él en la página de detalles de la medición, en la sección «Informe», pulsando el mosaico (1).

Este contiene la curva de pulso registrada, el pulso (en lpm) a lo largo del tiempo e información detallada sobre el ritmo cardíaco. El informe de resultados de la medición se compone de tres secciones (véase la Figura 11.1).



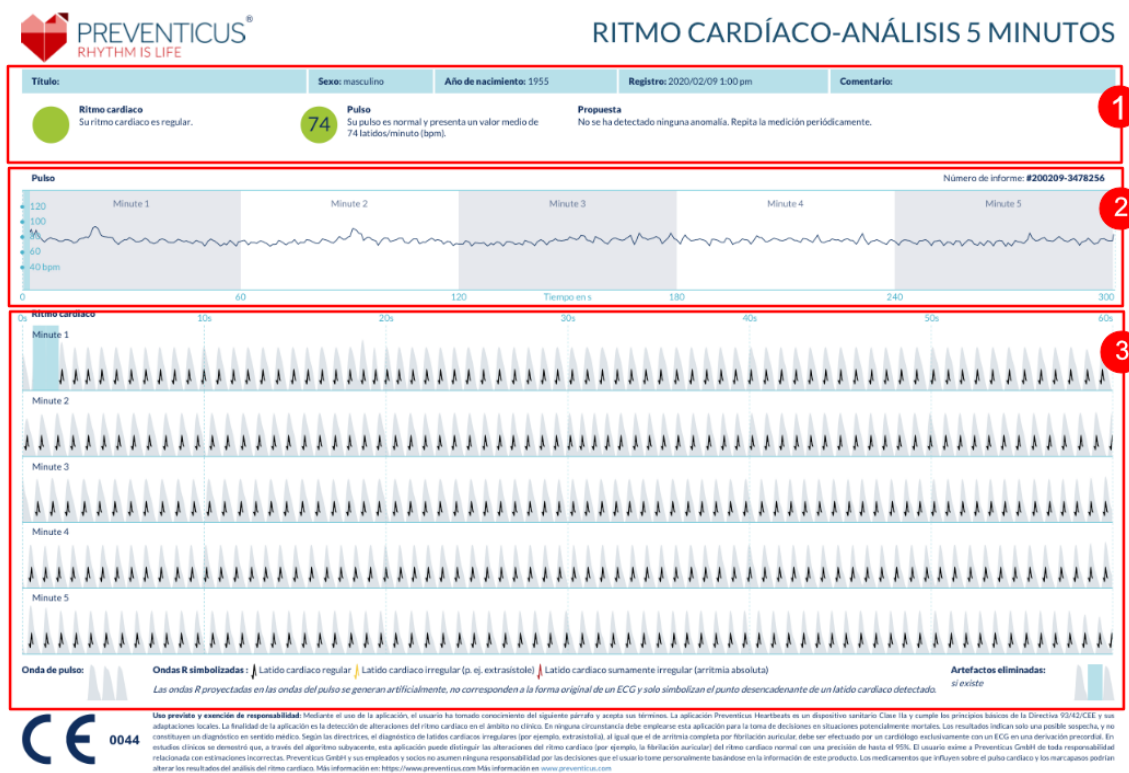


Figura 11.1 El informe de medición de Preventicus Heartbeats se compone de tres secciones: 1. Resultados resumidos del análisis del ritmo cardíaco. 2. Pulso en pulsaciones por minuto (ppm) a lo largo de toda la medición; 3. Curva de pulso original a lo largo de toda la medición.

El resumen de los resultados del análisis del ritmo cardíaco (véase la Figura 11.1 / Sección 1) contiene los datos básicos y la información optativa, como el nombre y los comentarios sobre la medición. Asimismo, se le ofrecen los resultados del pulso y del ritmo cardíaco también en forma de texto, con indicaciones de colores. Las indicaciones de colores corresponden a los colores del semáforo que se muestran en la pantalla de resultados (véase la Tabla. 10.1). En función de los resultados, se le recomienda una evaluación médica adicional por parte de personal especializado.

En la segunda parte del informe (véase la Figura 11.1 / Sección 2), se presenta el pulso en pulsaciones por minuto (ppm) a lo largo de toda la medición. Las oscilaciones leves del pulso, como se muestra en la Figura 11.1 / Sección 2 son normales y, en la mayoría de los casos, indican la interacción entre la respiración y las pulsaciones cardíacas.

Las desviaciones repentinas positivas o negativas, como se muestran en la Figura 11.2, indican pulsaciones cardíacas irregulares aisladas y pueden constituir un indicio de extrasístoles.



Figura 11.2 Resumen de los resultados del análisis del ritmo cardíaco y pulso en pulsaciones por minuto (ppm) a lo largo de toda la medición de un informe con alteraciones leves del ritmo cardíaco.

Las desviaciones positivas son resultado de las pulsaciones cardíacas irregulares que, en comparación con el promedio, tienen un intervalo significativamente menor respecto de la pulsación cardíaca anterior. Las desviaciones negativas en la frecuencia cardíaca indican, en comparación con el promedio, un intervalo significativamente mayor de la pulsación cardíaca irregular respecto de la pulsación cardíaca normal anterior.

La Figura 11.3 muestra la frecuencia cardíaca en caso de fibrilación auricular. El pulso es muy irregular durante toda la medición. Las oscilaciones del pulso surgen de manera caótica a lo largo de la medición.



Figura 11.3 Resumen de los resultados del análisis del ritmo cardíaco y pulso en pulsaciones por minuto (ppm) a lo largo de la medición en un informe con arritmia absoluta.

La tercera sección del informe de medición incluye la curva de pulsaciones original. En ella, cada onda de la curva de pulso corresponde a una pulsación cardíaca. Para el análisis del ritmo cardíaco se detectan puntos en la curva de pulso que se comportan de manera equivalente a la onda R en un ECG. Estos puntos se indican en forma de ondas R en la curva de pulso original para indicar una pulsación cardíaca detectada/reconocida (véase la Figura 11.4). Las ondas R negras simbolizan una pulsación cardíaca regular; las amarillas, una pulsación irregular (por ejemplo, extrasístole); y las rojas, una pulsación sumamente irregular por arritmia absoluta (sospecha de fibrilación auricular).

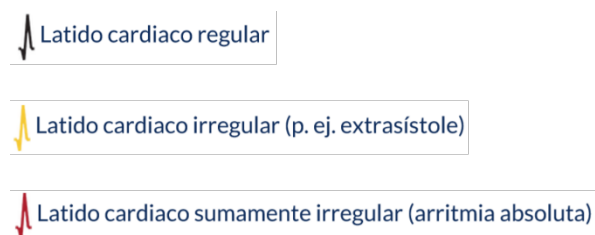


Figura 11.4. Leyenda de las ondas R en la curva de pulso original.

Las barras azules en la curva de pulso (véase la Figura 11.5) indican alteraciones reconocidas, que pueden surgir, entre otras razones, por movimientos, luz del ambiente circundante y una mala orientación de la cámara.



Figura 11.5. Curva de pulsaciones original del informe de medición con alteración detectada (barra azul)

11.2 Lista de Lista del informe de medición


Después de cada medición, los informes de resultados se guardan en una lista y se pueden consultar en la opción de menú «Resultados».

Para entender mejor cómo se lee un informe de este tipo, encontrará un vídeo explicativo en el submenú (los tres puntos) (1).

En la lista se muestran, uno tras otro, los resultados de las mediciones junto con la información principal: el resultado del pulso, el color del semáforo correspondiente a la medición y la hora en que se realizó la medición (2).

Al pulsar sobre un resultado de medición, este se muestra con todo detalle.

Los resultados de las mediciones se pueden borrar en cualquier momento desde la vista general de la lista (3). Para ello, pulse el icono de la papelera. A continuación, puede seleccionar los resultados que desea borrar marcando cada uno de ellos en la lista. En este modo, puede desmarcar cualquier resultado en cualquier momento pulsando de nuevo la casilla situada delante del resultado correspondiente. Para cancelar toda la selección, pulse el botón «Cancelar». Para eliminar los resultados de medición, pulse «Eliminar». Los resultados de medición se eliminarán inmediatamente.

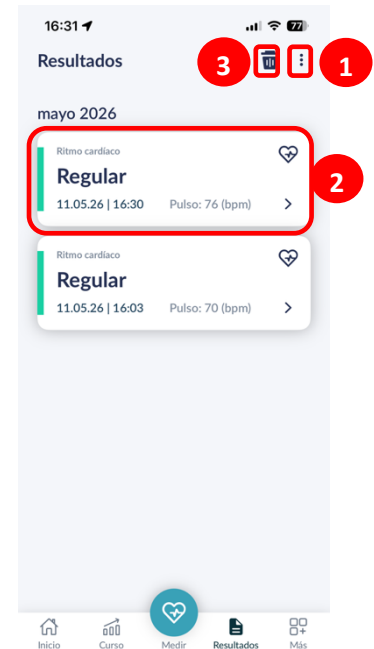

Puede volver a acceder a la página de detalles de cada resultado de medición, que también se muestra automáticamente tras cada medición, pulsando sobre una entrada de la lista de resultados de medición (2).

En la vista detallada de un resultado de medición, se puede compartir un informe en formato PDF con otras personas (4). Para ello, pulse el botón «Compartir» (iOS: // Android:). A continuación, puede elegir entre una selección de servicios para enviar el informe o guardarlo en su propio smartphone fuera de la aplicación. Se recomienda cifrar el documento o protegerlo con contraseña al enviar los informes.

Aunque haya abierto un informe en PDF directamente pulsando sobre el mosaico correspondiente (5), tendrá a su disposición el botón «Compartir» situado en la esquina superior derecha.



11.3 Telecare - Informes

Si tiene uno o varios informes en los que se sospecha de arritmias cardíacas leves (semáforo amarillo) o de arritmia absoluta (semáforo rojo), tiene la posibilidad de enviarlos al servicio de Telecare.

Si sus mediciones del ritmo cardíaco muestran anomalías, personal técnico médico con experiencia de un centro especializado de Telecare llevará a cabo un control de calidad de sus datos. De este modo, tanto usted como su médico tendrán la certeza de si un diagnóstico sospechoso se basa en una medición válida y sin interferencias y es fiable, o si podría deberse a señales de interferencia o errores de medición.


Si ha activado el servicio Telecare para una o varias mediciones, recibirá el resultado en la aplicación en un plazo de 3 días laborables. En el siguiente capítulo le explicamos cómo.



11.4 Telecare – Solicitar un informe

Cada medición con un ritmo cardíaco anómalo (semáforo amarillo o rojo) puede enviarse al servicio Telecare. Para ello, abra la página de detalles de una medición. Allí verá, debajo del informe en PDF, el icono del servicio Telecare (1). Al pulsar este icono, se iniciará el proceso de envío. El primer paso le muestra información (2) sobre si el servicio Telecare está disponible de forma gratuita para usted (por ejemplo, una vez al mes con la suscripción Value) o si desea comprar un análisis individual (por ejemplo, durante el periodo de prueba gratuito o con la suscripción Classic).

Si utiliza el servicio Telecare por primera vez, deberá aceptar una sola vez los Términos y condiciones y la Política de privacidad del servicio Telecare (3) (4).

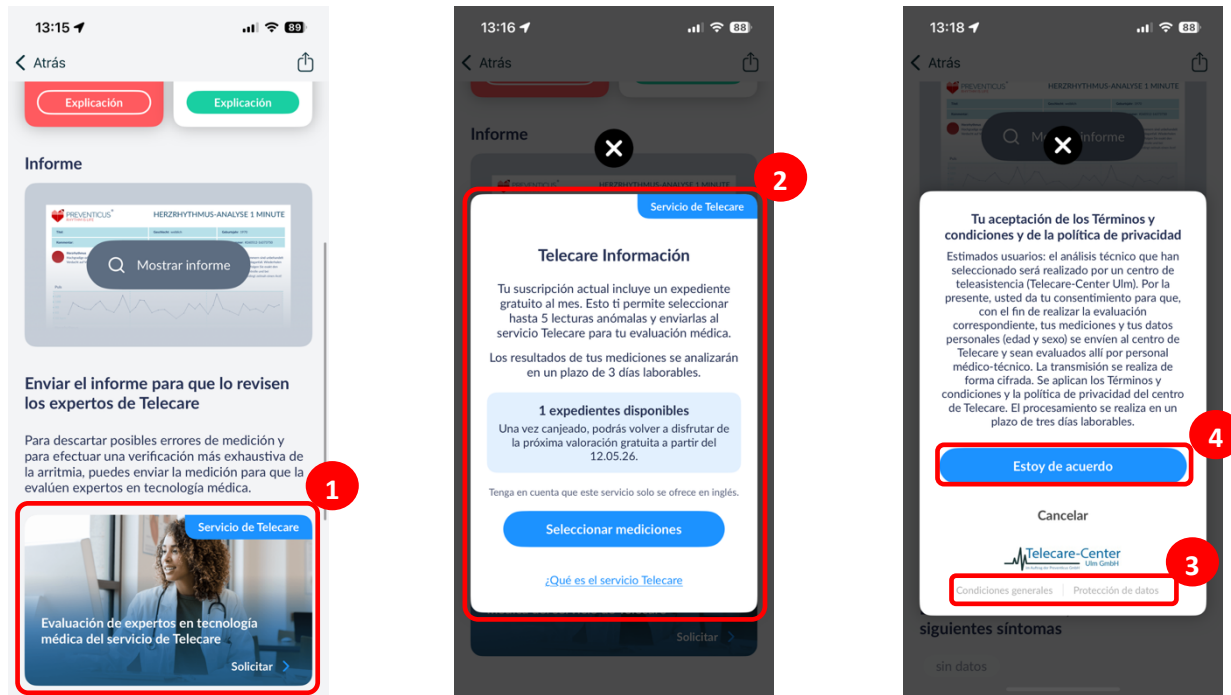


En el último paso, seleccione en la lista de resultados que se abre la(s) medición(es) que desea analizar. Inicialmente, aparece seleccionada la medición desde cuya página de detalles ha iniciado el proceso. Con la suscripción Value, tiene la posibilidad de enviar hasta 5 mediciones a la vez para su análisis una vez al mes. Para ello, puede seleccionar varias mediciones de la lista pulsando el círculo situado delante de cada una de ellas (aparecerá una marca de verificación) (5). Cuando haya terminado la selección, pulse «Analizar» (6). Con ello, el proceso de envío habrá finalizado.

Nota: Si ha adquirido un análisis individual, solo puede seleccionar una medición.




A continuación, en la lista de resultados de las mediciones y en la página de detalles de las mediciones enviadas (7) se le indicará que la(s) medición(es) se encuentra(n) actualmente en proceso de análisis. Recibirá el resultado en un plazo de 3 días laborables.

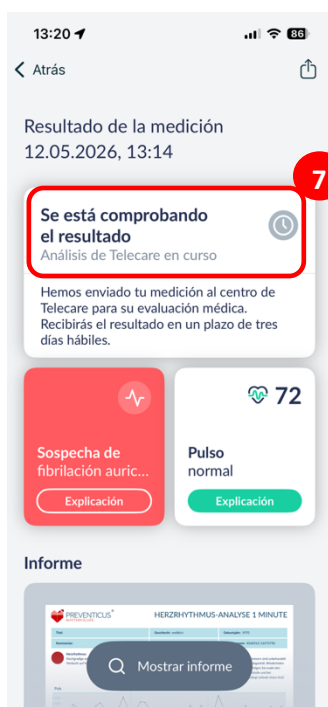

11.5 Telecare: ver estado e informe

Tan pronto como se haya completado la evaluación de Telecare, recibirá la información directamente en la página de resumen de la aplicación (1). También se le informará del nuevo estado en la lista de resultados de las mediciones y en la página de detalles de las mediciones enviadas (2). En la página de detalles de la medición, el informe PDF original de la sección «Informe» ha sido sustituido por el nuevo e más completo informe de Telecare. Puede abrirlo pulsando el mosaico correspondiente (3).

También puede compartir el informe de Telecare en la vista detallada con otras personas. Al pulsar el botón «Compartir» (iOS:  // Android: ) (4), se le mostrará una selección de opciones para enviar el informe o guardarlo en su propio smartphone fuera de la aplicación.

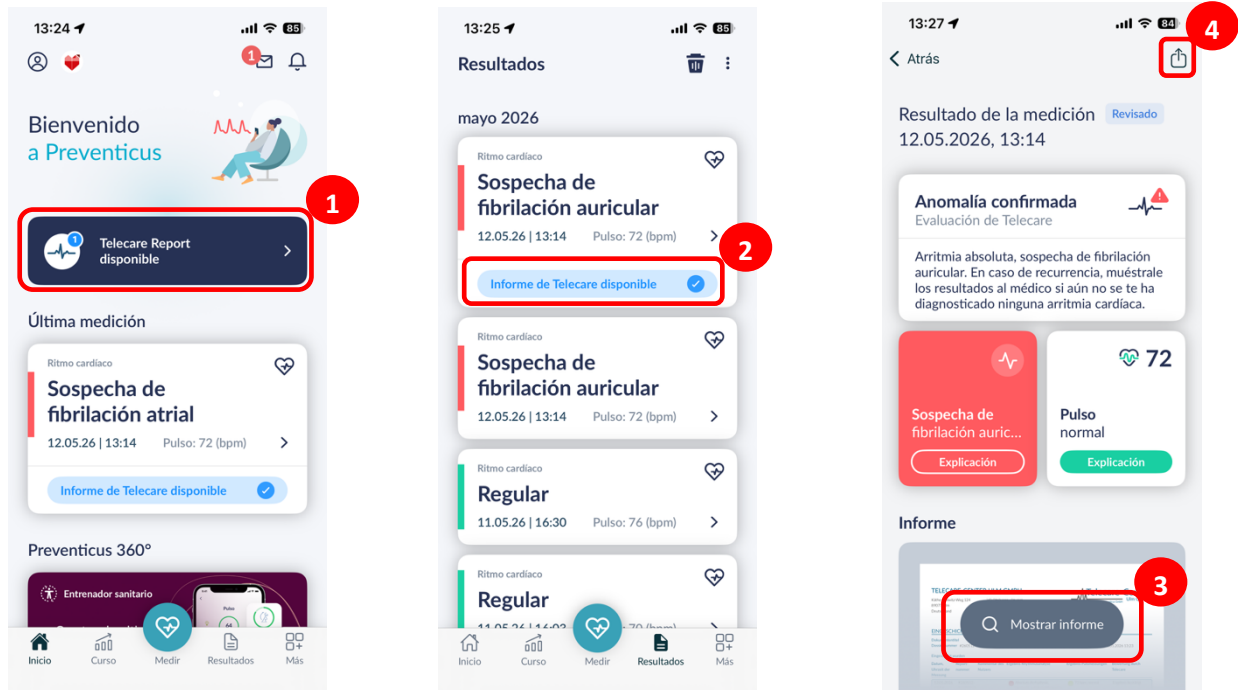

11.6 Inicio - Última medición

Si dispone de la versión completa y ha realizado una medición, el resultado de su última medición se mostrará en la página de inicio. Si hace clic en la pantalla, accederá al informe detallado de los resultados de su última medición.




12 Menú

Puede acceder al menú en cualquier momento a través de «Más» en la barra de navegación.

Consta de:

- **Cuenta de usuario:** Inscripción y registro (véase el Capítulo 12.3.1 Cuenta de usuario y Capítulo 14 Eliminar cuenta de usuario)
- **Datos básicos:** Información personal (véase el Capítulo 12.1 Datos básicos)
- **Compra In-App:** descripción general del rango de funciones de la versión previa a la prueba y completa (Capítulo 13.1 Compras desde la aplicación)
- **Recordatorio:** Función de recordatorio de las mediciones regulares (véase el Capítulo 12.2 Función de recordatorios)
- **Cuestiones legales:** Informaciones sobre los siguientes temas: declaración de finalidad, condiciones de uso y protección de datos, entre otros.
- **Sección de ayuda:** FAQ sobre preguntas frecuentes, así como consejos e información sobre el tema de la medición.
- **Acerca de Heartbeats:** Información sobre la aplicación Preventicus Heartbeats (véase el Capítulo 12.4 Acerca de Heartbeats)
- **Número de versión**

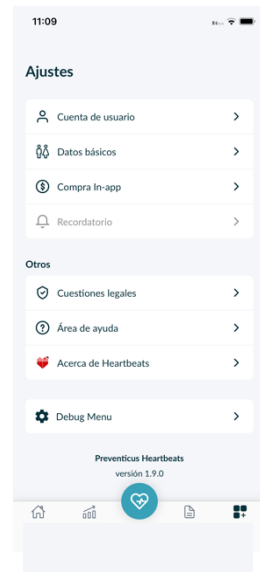


12.1 Datos básicos

Los datos de base están compuestos por el sexo y el año de nacimiento. Después de la primera medición completada, debe proporcionar sus datos básicos al crear el informe de medición para que pueda utilizarse para el análisis.

Como participante en el programa de cribado, usted introduce estos datos en el curso de la inscripción.

En la opción de menú Datos básicos puede consultar la información en cualquier momento y modificarla posteriormente.

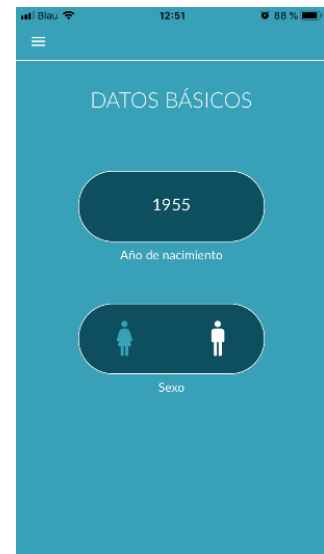

12.2 Función de recordatorios


En la sección del menú «Recordatorios» usted tiene la posibilidad de recibir recordatorios para las mediciones diarias. Con este fin, recibirá una notificación en su teléfono inteligente que le recordará que debe hacerse la medición.

Consejo: Para aprovechar la función de recordatorios, debe registrarse previamente.

Tiene la opción de personalizar los recordatorios. Para hacerlo, haga clic en el icono + (1).

Aparece un nuevo recordatorio (2). Introduzca un nombre, por ejemplo, «Medición diaria temprano», y a continuación seleccione la hora y el día de la semana. Confirme el recordatorio para activarlo (3) oprimiendo el icono de OK.

Usted puede editar (5) y borrar (4) el recordatorio en cualquier momento. Para borrar el recordatorio, diríjase al icono de «Editar» (5) y seleccione el símbolo de la papelera. El recordatorio se borrará definitivamente.

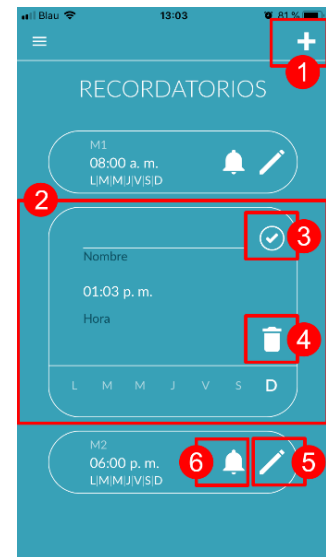


Es posible desactivar un recordatorio (6), oprimiendo el icono de «Campana» (bell icon). Si se introduce un nuevo recordatorio, este botón se activa en el modo estándar.

12.3 Inicio de sesión

Si se ha registrado y, por tanto, dispone de una cuenta de usuario, puede conectarse en cualquier momento con su correo electrónico o su nombre de usuario y contraseña y acceder a sus mediciones, informes y servicios activados.

1. Para iniciar sesión, seleccione el botón "Iniciar sesión" en la pantalla de inicio.
2. A continuación, accederá a la pantalla de inicio de sesión, donde podrá introducir su correo electrónico o nombre de usuario y contraseña. Haga clic en el botón "Iniciar sesión" para completar el proceso. Si olvida su contraseña, puede restablecerla en cualquier momento y elegir una nueva haciendo clic en "¿Ha olvidado su contraseña?".
3. Después de iniciar sesión con éxito, accederá a la página de resumen con todas las funciones.

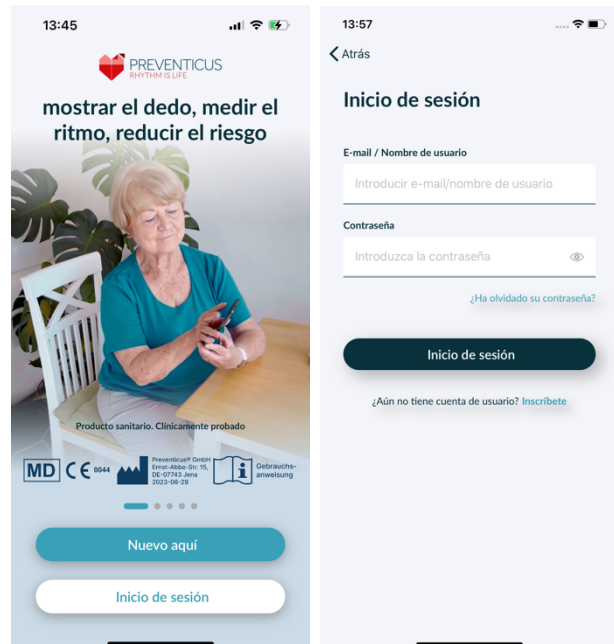

Nota: Si se ha equivocado al introducir su contraseña o ha introducido una contraseña incorrecta, el sistema le informará de ello. En este caso, introduzca de nuevo su contraseña.

Nota: Si no puede restablecer su contraseña, es muy probable que todavía no esté registrado como usuario. En este caso, haga clic en el botón "¿Todavía no tiene cuenta de usuario? Regístrese" y regístrese como nuevo usuario.

12.3.1 Cuenta de usuario

La sección «Cuenta de usuario» se encuentra en la barra de navegación, en «Más», y muestra todos los datos vinculados a tu cuenta de usuario. Aquí podrás ver si has iniciado sesión en tu cuenta de usuario y con qué dirección de correo electrónico lo has hecho (1).

Aquí también encontrará información sobre su suscripción y los servicios incluidos. Aquí tiene la posibilidad de cambiar, renovar o cancelar su suscripción (2).

También se le mostrarán todos los servicios vinculados a su cuenta de usuario que estén activos para usted (3).

Si ha recibido un código de acceso, por ejemplo, por correo postal de su seguro médico, también puede introducirlo en su cuenta de usuario (4) y así activar los servicios adicionales.

(i) Nota: La información sólo se mostrará si ha iniciado sesión con sus datos de acceso - correo electrónico o nombre de usuario y contraseña. Además, una cuenta de usuario sólo existe si usted se ha registrado como usuario.



12.3.2 Cambio de dispositivo

Nota: La transferencia de la cuenta incluyendo cualquier licencia de usuario existente así como todos los informes sólo es posible al cambiar el smartphone si se ha registrado anteriormente.

Con los siguientes pasos transferirá su cuenta de usuario de Preventicus, incluidos todos los datos, a su nuevo smartphone:

1. Instala la aplicación Preventicus Heartbeats en tu nuevo smartphone.
2. Abre la aplicación Preventicus Heartbeats.
3. En la pantalla de inicio, seleccione el botón "Iniciar sesión" para iniciar sesión en su nuevo dispositivo.
4. Introduzca el correo electrónico y la contraseña que utilizó para registrarse en Preventicus.
5. A continuación, haga clic en "Iniciar sesión".

Si ha olvidado su contraseña, utilice la opción "¿Ha olvidado su contraseña?". Esto le permitirá restablecer su contraseña y elegir una nueva.

Si ha olvidado por completo sus datos de acceso o no está seguro de si ya está registrado, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente: support@preventicus.com.

i Nota: No es posible iniciar sesión en dos dispositivos al mismo tiempo. Se cerrará automáticamente la sesión en el segundo dispositivo cuando inicie sesión en otro.



12.3.3 Múltiples usuarios - cambio de usuario


Tiene la opción de configurar la aplicación Preventicus Heartbeats para varios usuarios.

Para ello, utilice la opción de crear una cuenta de usuario para cada usuario a fin de garantizar que los datos de cada usuario sean privados y personalizados para ellos.

Una vez creada la nueva cuenta, puede cambiarla y, por tanto, el acceso, en cualquier momento.

Situación inicial - Un usuario ya ha iniciado sesión:

1. En la página de resumen, seleccione el mosaico "Perfil" y haga clic en él.
2. En la cuenta de usuario que se muestra puede ver si se ha iniciado sesión y con qué cuenta.
3. Para cambiar la cuenta de usuario, seleccione el icono de la esquina superior derecha (1). Tiene la opción de elegir entre "Cerrar sesión" y "Eliminar cuenta de usuario". Por favor, elija la opción "Cerrar sesión".
4. Después de cerrar la sesión, volverá a la pantalla de inicio. Aquí puede iniciar sesión en la aplicación con sus propios datos de acceso a través del botón "Iniciar sesión". Después de iniciar sesión correctamente, verá todas sus mediciones personales, así como sus servicios desbloqueados individualmente.

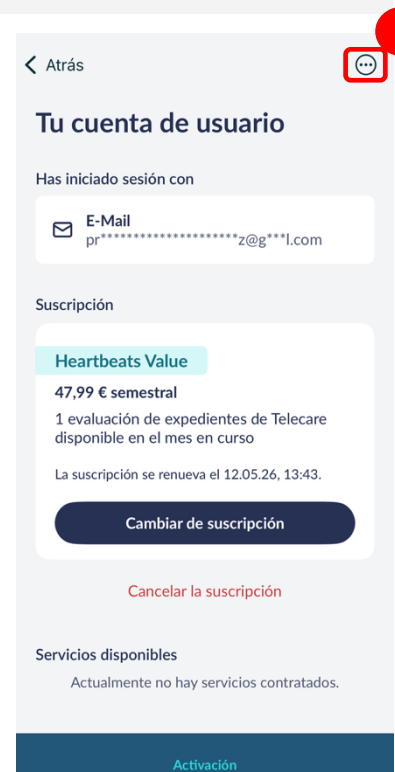

i Nota: Los servicios activados, como las licencias de versión completa o la participación en el programa de atención preventiva de una compañía de seguros médicos, están vinculados a la cuenta del usuario y no pueden transferirse ni compartirse.

12.4 Acerca de Heartbeats

En la sección «Acerca de Heartbeats», encontrará información sobre las consecuencias de las alteraciones del ritmo cardíaco, además de sobre las funciones y los contenidos de la aplicación Preventicus Heartbeats.

Accederá a esta sección desde la pantalla de inicio, bajo la sección «Por qué», además de desde el menú, bajo «Acerca de Heartbeats».



12.5 Lo que hay que saber

En la sección "Lo que hay que saber" encontrará información sobre la fibrilación auricular, la salud cardíaca, la prevención de accidentes cerebrovasculares y el programa de cribado.

13 Versión completa

13.1 Compra In-app

«Compra In-app» es una subopción del menú de la barra de navegación, situada debajo de «Más». En este resumen se muestran las suscripciones y los paquetes disponibles, así como los servicios y ventajas de las diferentes opciones.

Como nuevo usuario, tiene la posibilidad de realizar 7 mediciones con análisis completo. A continuación, puede decidir qué suscripción y qué paquete le convienen más: por ejemplo, «Classic» o «Value». Las prestaciones varían según el paquete. Infórmese en la página de opciones de compra sobre las diferencias y similitudes antes de tomar una decisión.

Además, las suscripciones se ofrecen con diferentes duraciones y las correspondientes ventajas de precio.

(i) Consejo: Se trata de una compra desde la aplicación. Para permitir esta compra, es necesario tener una cuenta activa en la tienda de su sistema operativo.

(i) Consejo: Para concretar la compra, no es necesario estar registrado.

Las compras completadas se pueden recuperar en la zona “Compras In-App” siempre que su período de validez no haya vencido ya. (2)

(i) Nota: En las compras desde la aplicación, les ofrecemos a nuestros clientes de iOS la posibilidad de restablecer todas las compras en un nuevo dispositivo, incluso en caso de cambio de teléfono inteligente, conservando el ID de Apple. De lo contrario, en caso de pérdida del dispositivo anterior, se perderían también las compras. Para poder vincular la información «Se efectuó la compra» con su cuenta, debe usar iCloud Drive. Por lo tanto, iCloud Drive es un requisito para la compra desde la aplicación de Preventicus Heartbeats.

(i) Nota: En caso de que no obtenga acceso a la versión completa, compruebe si ha iniciado sesión en la aplicación. Si todavía no se ha registrado en la aplicación, cierre todas las aplicaciones en su teléfono inteligente. Cierre la aplicación y vuelva a iniciarla. Abra el apartado “Compras In-App” en el menú. En el extremo inferior encontrará el botón «Restablecer compras». Con él podrá volver a tener acceso a la versión completa.

14 Eliminar cuenta de usuario

Si está registrado como usuario en la aplicación Preventicus Heartbeats, puede eliminar su cuenta de usuario y la información y documentos asociados en cualquier momento.

Tenga en cuenta que esta acción es definitiva. Tus datos no podrán ser restaurados si cambias de opinión.

Paso 1: ¿Qué ocurre si elimina su cuenta?

- Se perderán todos los datos, informes y compras asociados a esta cuenta.
- Ya no tendrá acceso a mediciones e informes anteriores.
- Perderá el acceso a las compras que haya realizado y a los contenidos que haya adquirido en AppStore o Google Play, por ejemplo, las revisiones de Teleasistencia.


Paso 2: Verificar y descargar datos

Antes de eliminar su cuenta

- Revise los datos de su cuenta.
- Los informes que desee conservar deben guardarse, transferirse a otro PC o reenviarse antes de eliminarlos.
- Para ello, utilice la función "Compartir" de cada informe.

Paso 3: Eliminar la cuenta

1. Abra el menú.
2. Selecciona la sección "Cuenta de usuario" en el menú.
3. En la parte superior de la vista de tu cuenta de usuario encontrarás un icono con tres puntos, detrás del cual se esconde un menú de navegación adicional.
4. Haz clic en el icono de los tres puntos para abrir el menú de navegación adicional.
5. A continuación, seleccione la opción "Eliminar cuenta". La siguiente pantalla listará todos los datos que serán eliminados.
6. Para eliminar su cuenta de usuario de forma permanente, haga clic en el botón "Eliminar cuenta" y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
7. Si su cuenta se ha eliminado correctamente, verá un mensaje de sugerencia.

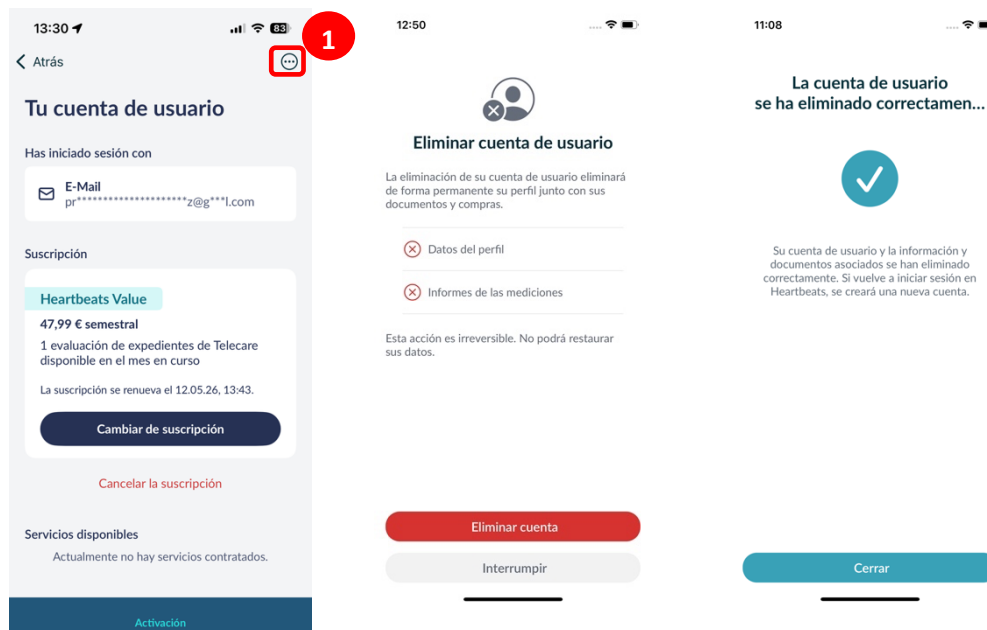


15 Salud

Puede acceder a la sección "Salud" a través de la barra de navegación. Para los usuarios con la versión completa o los usuarios del programa de prevención, el área muestra un gráfico del ritmo cardíaco y el pulso.

En el gráfico superior, los resultados del análisis del ritmo cardíaco de tus mediciones se muestran en color (verde, amarillo, rojo) mediante un gráfico circular. Debajo del círculo hay una lista de las veces que ha tenido una medición con el resultado del ritmo cardíaco verde - "Regular", amarillo - "Irregular" y/o rojo - "Sospecha de fibrilación auricular".

En el gráfico siguiente, los valores de pulso (latidos por minuto) de cada una de sus mediciones se muestran en un gráfico de puntos a lo largo de un mes. La escala de colores de la izquierda describe si el pulso es normal (verde), está ligeramente aumentado o disminuido (amarillo) o muy aumentado o disminuido (rojo). Además, se muestran la frecuencia de pulso media, así como la frecuencia de pulso mínima y máxima del mes seleccionado.

Los dos gráficos se refieren cada uno a un mes seleccionado. Haciendo clic en las flechas situadas junto al mes, puede pasar de un mes a otro y comparar sus valores.

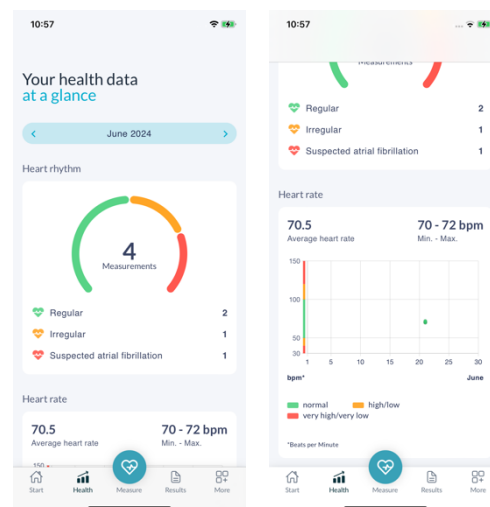


16 Buzón

Encontrará el buzón en la parte superior derecha de la pantalla de inicio. Para abrir el buzón, haga clic en el icono de la carta.

Todas las notificaciones importantes se enumeran cronológicamente en el buzón. Si hay nuevas entradas, se le indicará mediante una burbuja sobre el símbolo de la letra. En el buzón, también tiene una indicación de las nuevas entradas que aún no se han leído.

Al hacer clic en una entrada del buzón, aparece el correspondiente cuadro de diálogo detallado y desde allí se accede a la pantalla respectiva a la que se dirige la notificación.

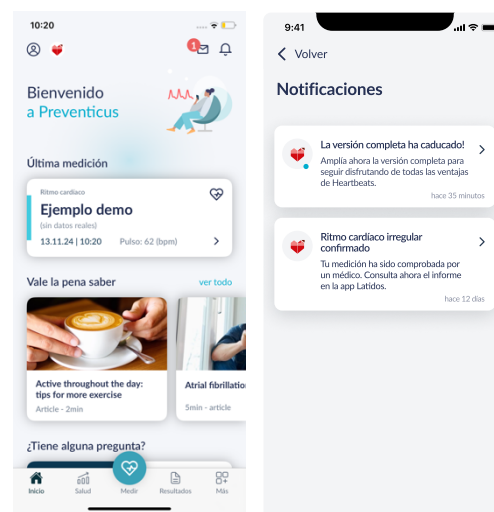

17 Mensajes de error

¿Cómo puedo acceder a la aplicación Preventicus Heartbeats? ¿Cómo instalo la aplicación Preventicus Heartbeats en mi teléfono?

Así es como se instala Preventicus Heartbeats:

1. En tu smartphone Android (por ejemplo, dispositivo Samsung o Huawei), abre Google Play Store o en tu smartphone iOS (iPhone), abre App Store.
2. Introduzca "Preventicus Heartbeats" en el cuadro de búsqueda.
3. Pulse "Descargar" o "Instalar" y observe el progreso.
4. Una vez instalada la aplicación, la descripción cambiará de "Instalar" a "Abrir".
5. Pulsa "Abrir" para iniciar Preventicus Heartbeats. Asimismo, la aplicación aparecerá como un icono de corazón en la pantalla de inicio de su smartphone. Tocando el logotipo, también podrán iniciar la aplicación.

¿Qué debo hacer si la conexión a Internet es débil (código de error 500)?

Intente situarse cerca del router WLAN o active los datos móviles de su teléfono para que los utilice Heartbeats. Si aun así la conexión es deficiente, active y desactive el modo de vuelo en su teléfono.

¿Qué debo hacer si no puedo actualizar la aplicación?

Contacte con support@preventicus.com.

¿Qué debo hacer si en la aplicación se muestra una maraña de letras o un idioma diferente?

Contacte con support@preventicus.com.

¿Qué debo hacer si en la aplicación se muestra el mensaje siguiente: «No se ha encontrado el testigo de sesión»?

Contacte con support@preventicus.com.

¿Qué debo hacer si no tengo conexión con el servidor? (Mensaje: «Problemas de comunicación con el servidor»)

Póngase en contacto con support@preventicus.com.

¿Qué debo hacer si la aplicación no se abre o falla?

Cierre la aplicación y ábrala de nuevo. Si la aplicación sigue sin funcionar, desinstálela. Instálela de nuevo desde la tienda de aplicaciones correspondiente y vuelva a entrar en la aplicación con su dirección de correo electrónico y su contraseña. Si eso tampoco ayuda, apague y encienda su teléfono y abra de nuevo la aplicación.

18 Desinstalación de la aplicación

Preventicus Heartbeats es un software independiente que se emplea en conexión con un teléfono inteligente, aunque no es un dispositivo ME en el sentido de IEC 60601-1. La eliminación del producto se efectúa mediante la desinstalación de la aplicación del teléfono inteligente del usuario. Cuando se borra una aplicación por la que ha pagado, puede instalarla nuevamente sin cargo.

19 Datos técnicos

	iOS	Android
Idiomas	alemán inglés francés español italiano	alemán inglés francés español italiano
Sistema operativo requerido	iOS 15	Android 8.0



Preventicus® GmbH
Ernst-Abbe-Str. 15,
DE-07743 Jena

Este software independiente es un producto sanitario clasificado como categoría de riesgo IIa, de acuerdo con la norma 11 del Reglamento (UE) 2017/745.

20 Información del fabricante

La aplicación Preventicus Heartbeats es un producto de Preventicus GmbH. Los datos de contacto son

Preventicus GmbH
Ernst-Abbe-Straße 15
DE-07743 Jena
Alemania
Teléfono: +49 (0)3641 55 98 45 -0
Sitio web: www.preventicus.com
Correo electrónico: info@preventicus.com

Si tiene preguntas sobre el producto y su uso, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente:

Correo electrónico: support@preventicus.com.